


USTO-LUX Luxationsheber

Diese Wurzelheber haben sehr flach auslaufende Arbeitsenden und eignen sich speziell zur rotierenden, axialen Luxation sowie zum Durchtrennen des zirkulären Ligaments. Bitte keinesfalls damit „hebeln“, da ansonsten die Gefahr des Frakturierens oder Verbiegens des sehr dünnen Arbeitsendes besteht.

These USTO-LUX elevators are very flat towards the ends and are especially suited for rotating, axial luxation and also for dissecting the circular ligament. On no account should they be used for „levering“, as this could fracture or bend the very thin working end.

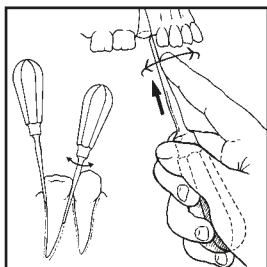


Korrekte Anwendung /
Correct application



Belangrijke mededeling van Ustomed

**Deze geldt voor alle Ustomed Elevators
met art.nrs.**

**83-120-003
tot en met
83-121-005**

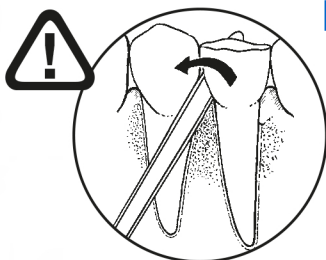

Falsche Anwendung /
Incorrect application

**Neem voor meer informatie contact op
met DANSE DENTAL CARE via:
klantenservice@dansedentalcare.nl
of +31649893998**



1/1

USTO-LUX

Die kurz nach dem Griff beginnende konvexe Form des Schaftes ermöglicht eine bessere Fingerauflage. Dadurch wird eine sichere Instrumentenführung während der Extraktion erreicht.

The convexity of the shaft starting right from the handle provides an improved finger rest. By this, guidance of the elevator during extraction is rendered sensibly safer.